



PCS promotes the use of best practice with new disinfectant wipes packaging

PCS 1000 Oxidizing Disinfectant/Disinfectant Cleaner Wipes are now packaged in a convenient pouch containing one container with 0.1% of sodium hypochlorite and a roll of 70 dry wipes. This way of packaging offers a 2 year shelf life in sealed unopened containers and is designed to be safer for staff by eliminating the need to touch pre-moistened wipes while threading the container.

New packaging and process



To make pre-moistened wipes.
Remove container and dry wipes from plastic pouch.



Place container on a flat surface and secure with one hand. Pry top of container towards you with the other hand to remove. OR Place container on a flat surface and secure with two hands. Push upwards with both thumbs to remove the top from the container.

Once open peel the protective seal off slowly.



Slowly place roll of dry wipes into container.



Thread wipe through lid and snap lid back onto container.




Dispense wipe from container, use to clean and disinfect surfaces. Discard in trash.

Keep lid closed.

PCS Activation Stickers

Allows for easy and convenient identification when containers are put into service.



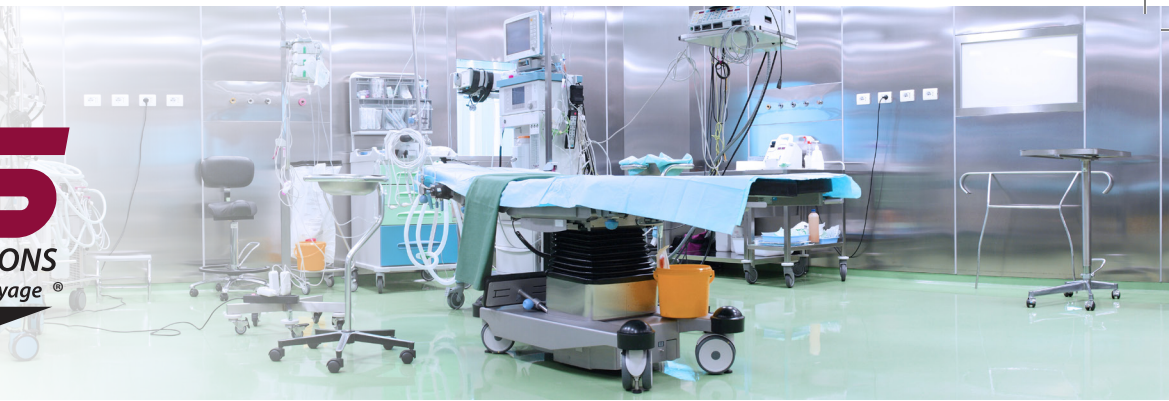

PCS favorise l'adoption de meilleures habitudes grâce à son nouvel emballage de lingettes désinfectantes

Les lingettes PCS 1000 oxydantes désinfectantes et nettoyantes désinfectantes sont maintenant offertes dans une enveloppe pratique comportant un pot d'hypochlorite de sodium 0.1 % et un rouleau de 70 lingettes sèches. La durée de conservation du produit dans ce nouvel emballage est de 2 ans, s'il est scellé et non ouvert. Il est ainsi plus sûr pour le personnel, qui n'a plus à toucher les lingettes préhumectées en manipulant le contenant.

Nouvel emballage et mode d'emploi



Pour obtenir des lingettes préhumectées.
 Retirer le pot et les lingettes sèches de l'enveloppe en plastique.



Déposer le pot sur une surface plane et le tenir d'une main. Amener le dessus du pot vers vous et utiliser votre autre main pour retirer le couvercle OU poser le pot sur une surface plane et le tenir à deux mains, puis pousser le couvercle vers le haut à l'aide de vos deux pouces pour enlever le couvercle. Lorsque le pot est ouvert, retirer le sceau protecteur lentement.



Mettre le rouleau de lingettes sèches doucement dans le pot.



Passer la lingette par le couvercle et remettre le couvercle en place sur le pot.



Distribuer la lingette à même le pot et utiliser pour nettoyer et désinfecter les surfaces. Jeter à la poubelle. Tenir le couvercle fermé.

Autocollants d'activation PCS

Pratiques, ils permettent d'identifier rapidement les pots déjà ouverts.

